



# ES-PERKINS

Tonomètre à aplanation portable de Perkins



OPHTHALMOLOGIE / ENT




# ES-PERKINS

Hcbca „hfY`{ `Ud`UbUH|cb`dcfHJV`Y`XY`DYf`\_]bg

Patients postopératoires, couchés, et pédiatriques ont toujours été difficiles à examiner avec la méthode de tonométrie à aplanation traditionnelle. Le Perkins a été conçu spécifiquement en pensant à ces patients.

Le Perkins a été établi comme un standard mondial depuis 10 ans pour les tonomètres à aplanation portable. Basé sur les principes Goldmann et utilisant l'original Goldmann ou les prismes Tonosafe, le Perkins combine la technologie approuvée avec la flexibilité d'un instrument portable.

Combiné avec efficacité et souplesse, le Perkins offre une précision approuvée et une visibilité brillante. Les mouvements de précision contrebalancés permettent de prendre la lecture avec le patient dans n'importe quelle position. Le système d'éclairage à LED produit une image améliorée, indépendamment des conditions d'éclairage de l'ambiance. La source LED consomme moins d'énergie et augmente les temps de fonctionnement obtenus à partir de la batterie rechargeable intégrée ainsi que la production des températures de fonctionnement plus basses, ce qui donne plus de confort au médecin et au patient.

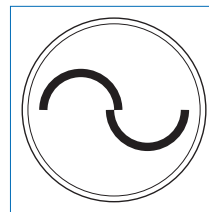

ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

